

補装具 モジュラー式


マルチポジショニング ウィールチェアー

NOVA_RiseActive

ノーヴァ_ライズアクティブ

¥350,000～

オーダーフォームはこちら

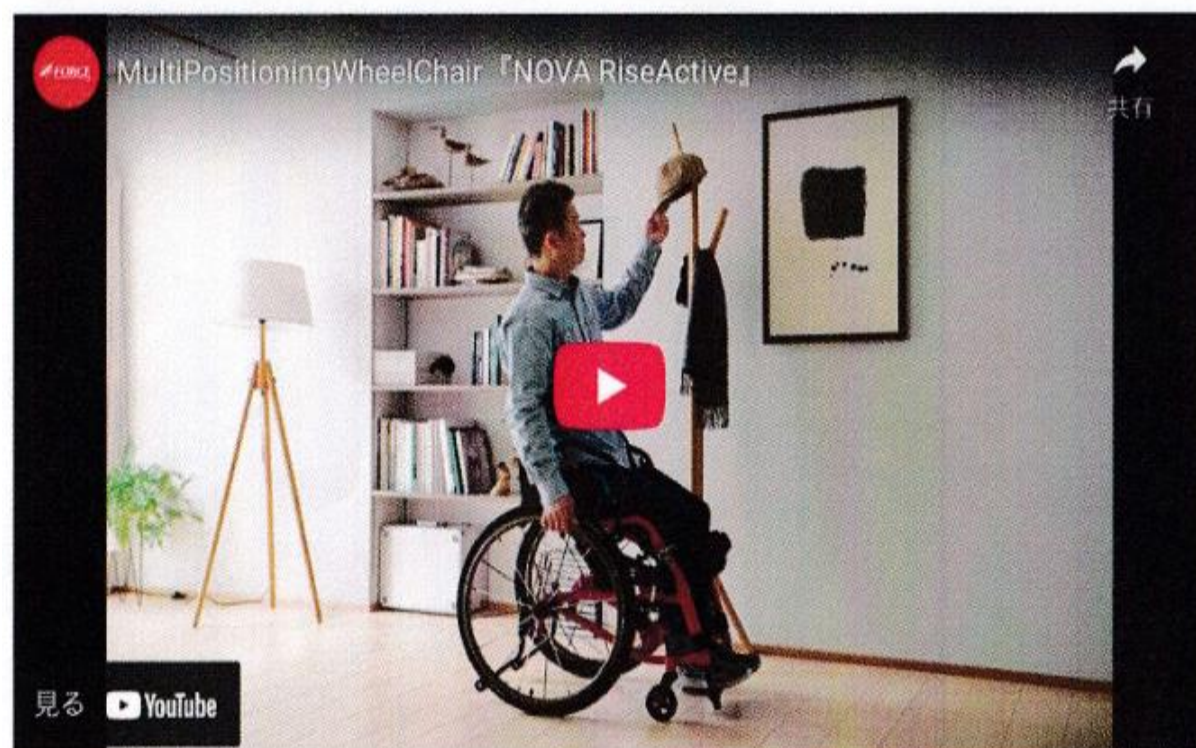

適切なシートポジションの選択は、生活に新たな変革をもたらし、多様なライフスタイルを創造します。



↑
PAGE TOP



アクティブ
ポジション

✓日常生活における
作業範囲の拡大
作業効率の向上

✓リハビリ効果・高所の作業性

スタンディング
ポジション

ドライブ
ポジション

ライフシーンに合わせて
**最適な
ポジション**
を選択する

✓軽快で伸びやかに移動する
車いすから○○へスムーズに移乗する

※ドライブポジション以外で車いす操作を行う際は、必ず胸ベルト・ニーベルトを装着してください。

↑
PAGE TOP

生活の中で椅子や車いすに長時間座っている人のために
「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、
おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する 車いす用クッション

Power Cushion

パワークッション



ノーマルタイプ
(安定重視)



ハイトタイプ
(座圧重視)

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援：座位保持装置完成用部品

対象者 車いすや座位の姿勢で長時間過ごす人、プッシュアップが必要な人

PAT.P


体圧分散性能

3Dフィットエアセルが大腿部・坐骨部・尾骨部を包み込むように支え、体圧を分散させます




自動体圧調整

誰が座っても最適な体圧分散になるように自動で調整します

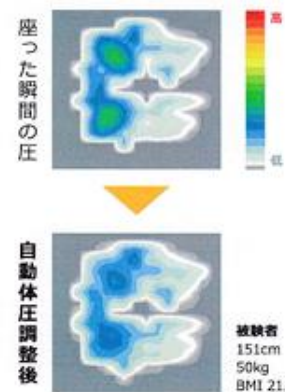

除圧性能

3Dフィットエアセルの圧切替によって坐骨部や尾骨部の除圧を自動的に行います
プッシュアップと同様の効果です (15分ごと)

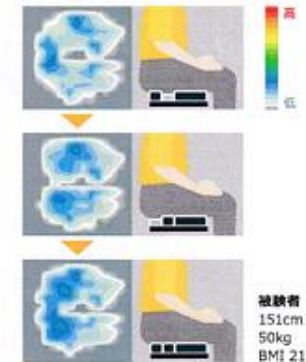

パワーバンク (充電式バッテリー)



電池残量の確認

パワークッション底面の窓からLEDの点灯で電池の残量が確認できます

パワーバンクはリチウムイオン式で「スマートフォン」や一般的な「モバイルバッテリー」と同じです
事故や故障の原因となるため「高温下での放置」や「劣化したパワーバンクの使用」はしないでください

操作パネル

【かたさ調整】

最適な圧力に自動で調整します
必要に応じて3段階でかたさを選ぶことができます

【除圧】

「静止型」と「圧切替型 (除圧)」の選択ができます

介護保険		汎用性のあるサイズのクッションをご希望の場合									
タイプ	品番	TAISコード	サイズ (cm)				重量 (kg)	バッテリー持ち時間の目安			
			幅	長さ	厚さ	取厚部		活動性が低い	活動性が高い		
ノーマルタイプ	MPWCL	00054-000439	38	40	8	11	1.2	連続約50時間	連続約15時間		
ハイトタイプ	MPWCHL	00054-000616			11	14		連続約35時間	連続約11時間		

障がい者総合支援

個別の車いすにあうクッションをご希望の場合

●品番等の詳細はお問い合わせください

●幅・長さはサイズ表を参考に、お使いの車いすに合うサイズをお選びください

●クッションタグのカラーは、イエロー/グレーの2色から選べます

●受注生産のため納品まで2週間程度かかります

クッションタグ

イエロー

グレー

サイズ	長さ					
	cm	34	36	38	40	43
幅	32					
	34	S		SL		
	36			M		SL
	38				L	
	40					LL

<素材>

●エアセル：ウレタンフィルム

●底着き防止フォーム：ウレタンフォーム

●クッションカバー表面：ポリエステル

●クッションカバー裏面：ナイロン（滑り止め加工）

●インナー保護カバー：ウレタン合皮<充電方式>

AC100VまたはUSB/DC5V

価格

オープン価格

<素材>

- エアセル:ウレタンフィルム
- 底着き防止フォーム:ウレタンフォーム
- クッションカバー表面:ポリエステル
- クッションカバー裏面:ナイロン (滑り止め加工)
- インナー保護カバー:ウレタン合皮

<充電方式>
AC100VまたはUSB/DC5V

価格
オープン価格

駐車ブレーキ操作が必要ない歩行車 ジスタ

Tacaof



グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかる、
新たなブレーキシステム

①グリップから手を離す



②グリップを握る



③ブレーキレバーを握る



グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります(①)。
グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります(②)。
その状態でブレーキレバーを握ると制動ブレーキが作動します(③)。



座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。

こんなヒヤリハットの経験、ありませんか？

幸和製作所は歩行車のヒヤリハットゼロをめざします

Case 01

人的要因のヒヤリハット

駐車ブレーキをかけ忘れて座ろうと(立ち上がろうと)したため、車体が動いて転倒しそうになったことはありませんか？



ジスタなら！

駐車ブレーキ操作が不要

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかるので、かけ忘れることなく安心です。



Case 02

歩行車の構造が要因のヒヤリハット

立ち上がる時ブレーキレバーに引っかかり、意図せず駐車ブレーキが解除されてしまい、車体が動いて転倒しそうになったことはありませんか？



ジスタなら！

座面を出した状態では
駐車ブレーキは解除されません

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握っても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。



Case 03

生活環境が要因のヒヤリハット

毛髪やゴミなどがタイヤに絡まり動きが悪くなり、バランスを崩したことはありませんか？



ジスタなら！

その場でかんたんにお手入れが可能です

工具が不要で、かんたんにタイヤの着脱ができます。
その場ですぐにお手入れができるため安心してご使用いただけます。



工具不要でタイヤの着脱が可能なタイヤ固定ユニット



前輪

タイヤ固定ユニットのフタを開きます。



タイヤ固定ユニットを上スライドさせて取り外します。



タイヤを外します。



後輪


後輪キャップを取り外します。



タイヤ固定ユニットのフタを開き、上にスライドさせて取り外します。



タイヤを外します。

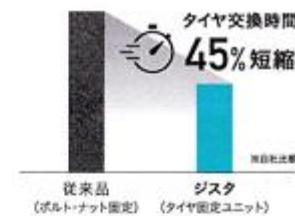

タイヤ交換時間の短縮

従来品のボルト・ナット固定と比較し、タイヤ交換時間を約45%短縮しました。※自社比較

締め付けトルクの管理不要

ボルト・ナットを使用していないため、締め付けトルクの管理が不要です。

かんたんお手入れ


タイヤの着脱がかんたんにできるため、その場でお手入れが可能です。

日常生活をラクにするコンパクトサイズ



歩行車の中でも最小クラスで、狭い通路でも扱いやすいです。

多くの人にフィットする押し手高さ

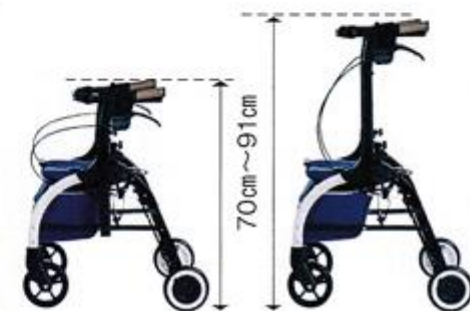

押し手高さが幅広く調節できるので、背の高い方から低い方まで使用できます。高さ調節ネジは抜け落ちない構造になっているため、紛失を防止します。

抜け落ちない高さ調節ネジ



タイヤの交換時期がひと目でわかる



側面の△マークまでタイヤが擦り減ったら、取替え時期の目安です。

ワンタッチ切り替え2WAY キャスター



ボタンを押す、レバーを戻すだけのかんたん操作で、キャスター回転角度を120°または360°に変更できます。

カゴ載せ機能



コンパクトな製品幅でも買い物カゴが載せられるため、買い物カートに持ち替えることなく、歩行車のまま買い物ができます。

荷物用フック



座面下の袋に加えて、軽量の荷物をフックに掛けることができます。

ワンタッチステッキホルダー



クリップ式なので、片手でかんたんに杖の着脱ができます。

折り畳み時

アルミ塗装仕上げ

最大使用重量 80kg

下袋最大積載荷重 5kg

フック最大耐荷重 合計2kg

ネイビー

ジスタ / Zista

¥99,000(税込) ¥90,000(税抜)

品番 WAW33

組立て寸法 幅480×奥行600×高さ715～925mm

折畳み寸法 幅480×奥行370×高さ780mm

押し手高さ 700～910mm 8ポジション

座面寸法 幅295×奥行230mm

座面高さ 465mm

袋寸法 幅290×奥行195×高さ180mm

重量 5.9kg

材質 本体：アルミニウム合金、座面・袋：ポリエステル

J A N 4938765021199

T A I S 00030-000241 ※各寸法、重量は参考値です。

HP アイリンク オリジナル歩行器

アルファ

アイルウォーク α

理学
療法士と

優れた機能と安全性を、
美しいデザインに込めて。



安心・安全

折りたたみ時や座面をおろした
時に自動でブレーキが作用



歩行しやすい

自動ブレーキ解除や
2段階キャスターで歩行が楽に



便利な機能

使いやすい杖置きや
バッグを装備



美しいデザイン

出かけたくなる
お洒落なデザイン

アイルウォークα^α 6つの特徴

2.

機能的な
2段階キャスター



訓練時は直進に固定すれば安定した歩行が行えます。



左右 60°にも可動できるので、おでかけの際スムーズに歩けます。

3.

バッグは取り外して
利用できます



を取り外し、ショールームバッグとしてお使いいただけます。

4. 高級感漂うシックな
デザイン



シックなカラーとキルティング生地で、高級感漂うデザインとなっています。

5. 杖が落ちない
嬉しい設計



杖置きをプッシュ式にする事により、折りたたみ時に杖が落ちる事はありません。

1.

自動でブレーキが
作動&解除



座面を下ろすと自動的にブレーキがかかるので座る時に安全です。



座面を上げると自動的にブレーキが解除され、歩行しやすくなります。



折りたたみ時にも自動的にブレーキがかかるので安心です。

6. ブレーキは片方
だけでも作動



左右どちらかを握ればブレーキがかかります。握り心地も軽く、扱いやすくなっています。

理学療法士の観点から活かされています



理学療法士 平松 崇典

正しい姿勢の保持に加え安全性を重視

座面を下ろした状態で使用すると、身体が歩行器から離れ前傾姿勢となり正しい姿勢が保てません。アイルウォークαなら座面を上げた状態でしか歩行器が動かないので、自然と良い姿勢が保てます。



理学療法士 片山 平平

の安定性で歩行練習にも最適です!!

前輪タイヤにスタビライザーを付ける事で左右のタイヤが同時に動く事になり、歩行器の安定性が大幅に向上しました。歩行時のバランスが不安定な方や、従来の歩行器では前輪をうまくコントロール出来なかった方でも安心して歩行練習が行えます。



スタビライザー

※カタログと実際の製品の色・柄は多少異なる場合があります

仕様

価格	¥63,800 (税込)
バッグの積載量	3kg
耐荷重	75kg
キャスター径	18.5cm
前輪タイヤ	2WAY 固定と左右 60度
材質	アルミ
TAISコード	01446-000001

寸法

使用時			収納時		
H	W	D	H	W	D
約79.5 ~88.5 (4段階)	約51.5	約62	約85	約51.5	約38

(単位cm)

重量

全体	車体のみ	袋・座面・背もたれ
約6.4	約5.6	約0.8

(単位kg)



株式会社アイルリンク Tel(086)805-4550

〒700-0971
岡山市北区野田3-16-1
Fax(086)805-4551

リトルターン ハイタイプ

コンパクトで小回りの良い歩行車。外出時に歩行補助が必要な高齢者の方に。

レンタル対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

LITTLE TURN



サイズ・容量 幅48×奥行65×高さ74～86cm(座面高)47cm(折りたたみ幅)26cm

重量 約6.5kg

材質 (座面・バッグ) ポリエステル
(フレーム) アルミニウム
(ハンドルグリップ) エラストマー
(ハンドル・ホイール・ブレーキパー・ブレーキ調節ネジ) PP
(タイヤ) EVA樹脂

色調 ワインレッド

※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

メイン動画



製品情報 >

排泄介護用品 >

入浴介護用品 >

住宅関連用品 >

移動・歩行用品 >

歩行車

シルバーカー

杖

介護予防用品 >

食品 >

衛生用品 >

みまもり用品 >

販売終了品一覧 >

リトルターン Z

リトルターンシリーズにコンパクトな前腕支持タイプの歩行車が登場！小回りがよく、狭い室内移動も楽々！

レンタル対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg



サイズ・容量 幅51×奥行(※)62.5×高さ87.5～107.5cm(座面高)53.5cm(アームレスト高)82.5～102.5cm
※抑速付タイプの奥行は65cm

重量 (Z) 約9.5kg
(ZT ※トレイ付) 約10.5kg
(Z 抑速付) 約11.0kg
(ZT 抑速付 ※トレイ付) 約12.0kg

材質 (座面・バッグ) ナイロン
(フレーム) アルミニウム
(ハンドルグリップ) 合成ゴム
(アームレストクッション) EVA樹脂/ポリウレタン
(タイヤ) (前輪) EVA樹脂、(後輪) 合成ゴム
(回転補助ローラー・トレイ※) PP
※トレイ付タイプのみ

色調 ワインレッド

※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。